

ESTUDIO DE EFICACIA CLÍNICA DE 12 SEMANAS DE AGELOC® LUMISPA®

Resumen de una evaluación por parte de un profesional independiente que se realizó de conformidad con las Buenas Prácticas Clínicas y los Procedimientos Operativos Estándar de la Organización.

©2017 NSE Products, Inc., Provo, UT

INTRODUCCIÓN

Nu Skin creó un nuevo dispositivo para el cuidado de la piel que puede mejorar la apariencia de la piel mientras la limpia. Lo hace a través de la tecnología de Oscilación por Micropulsaciones, un movimiento de oscilación inversa pulsante de 15 Hz. Esto da como resultado un movimiento único de la piel que es una interacción entre la superficie de silicona y los productos tópicos especialmente creados. Evaluamos los beneficios de este movimiento en la apariencia de la piel a lo largo de una evaluación clínica de 12 semanas.

MÉTODOS

El área de Investigación y Desarrollo de Nu Skin contrató con una casa de pruebas independiente de Estados Unidos para evaluar la eficacia de tres sistemas de ageLOC LumiSpa. Se seleccionaron tres grupos de 30 mujeres con tipo de piel Fitzpatrick I-IV, de entre 35 y 65 años de edad, en función de su tipo de piel, ya sea de normal a mixta, grasa y seca. A las personas con piel normal a mixta se les asignó el cabezal de tratamiento normal y un producto tópico específico para piel normal a mixta. A las personas con piel grasa se les asignó el cabezal de tratamiento firme y un producto tópico específico para piel grasa. A las personas con piel seca se les asignó el cabezal de tratamiento normal y un producto específico para piel seca. Se instruyó a los sujetos a utilizar el sistema ageLOC LumiSpa en lugar de su limpiador facial normal en la mañana y en la noche. Se realizaron evaluaciones clínicas de clasificación y autopercepción de una serie de características de belleza de la piel en el punto inicial y en las semanas uno, dos, cuatro, ocho y doce.

RESULTADOS

Los sujetos observaron mejorías estadísticamente significativas en cuanto a las características visibles de belleza de la piel incluyendo suavidad, tersura, limpieza, aspecto radiante, claridad, luminosidad, aspecto de los poros y firmeza de la piel al final y/o durante todo el estudio. Las mejorías en las características variaron un poco entre cada grupo y mostraron diferentes respuestas en diferentes tipos de piel. Las mejorías en el número de características y su intensidad se extendieron a lo largo del estudio de 12 semanas. Ver las Figuras 1-3. Por ejemplo, la suavidad y tersura de la piel se observaron desde la primera semana y continuaron mejorando a lo largo del estudio. Mientras que los sujetos no pudieron notar mejorías en la apariencia de los poros y la firmeza hasta las semanas cuatro y ocho, respectivamente.

En el tipo de piel normal a mixta utilizando un producto tópico formulado para las necesidades de la piel y el cabezal de tratamiento normal se notaron las siguientes mejorías en la semana 12:

Autopercepción
Normal-Mixta c/ Normal

- Suavidad 58%
- Tersura 47%
- Limpieza 63%
- Brillo 40%
- Aspecto radiante 34%
- Claridad 31%
- Luminosidad 36%
- Apariencia de poros 27%
- Firmeza 25%

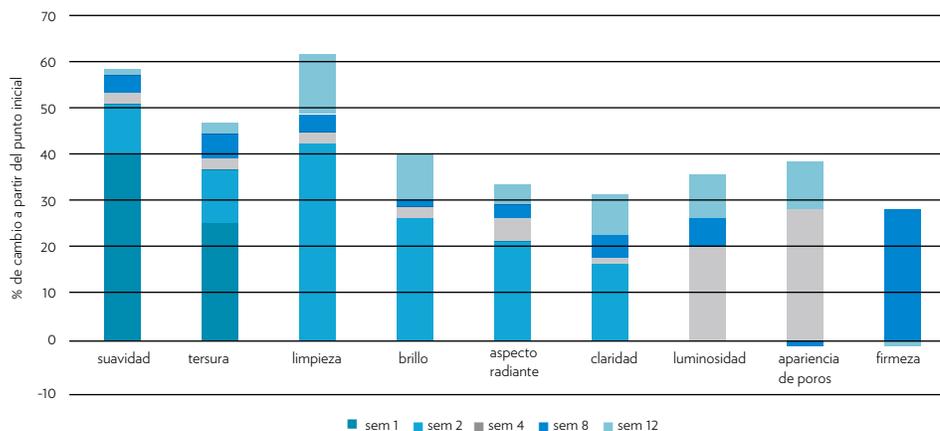


Figura 1

En el tipo de piel seca utilizando un producto tópico formulado para las necesidades de la piel y el cabezal de tratamiento normal se notaron las siguientes mejorías en la semana 12:

- Suavidad 45%
- Tersura 34%
- Limpieza 62%
- Brillo 31%
- Aspecto radiante 33%
- Claridad 33%
- Luminosidad 29%
- Apariencia de poros 43%
- Firmeza 28%

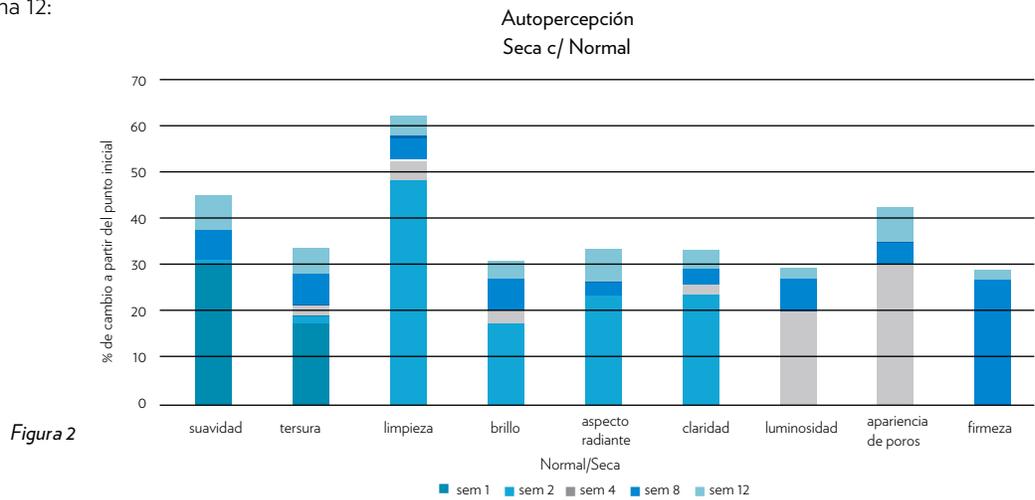


Figura 2

En el tipo de piel grasa utilizando un producto tópico formulado para las necesidades de la piel y el cabezal de tratamiento firme se notaron las siguientes mejorías en la semana 12:

- Suavidad 43%
- Tersura 36%
- Limpieza 60%
- Brillo 32%
- Aspecto radiante 37%
- Claridad 34%
- Luminosidad 39%
- Apariencia de poros 36%
- Firmeza 22%

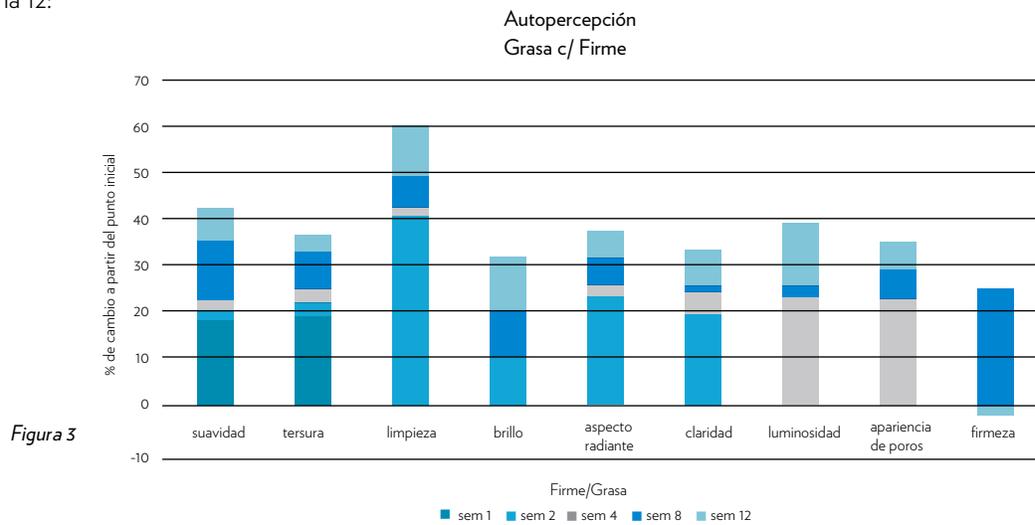


Figura 3

En los mismos grupos de estudio, la clasificación clínica señaló que un porcentaje considerable de sujetos también tenía mejorías visibles dentro de los grupos. De hecho, el 100% de los sujetos fueron calificados de acuerdo con las mejorías visuales en cuanto a tersura, suavidad y limpieza en todos los grupos para la semana 12. El grupo de piel grasa, todos los sujetos mejoraron en cuanto a claridad y luminosidad según la clasificación clínica. Ver la Figura 4-6.

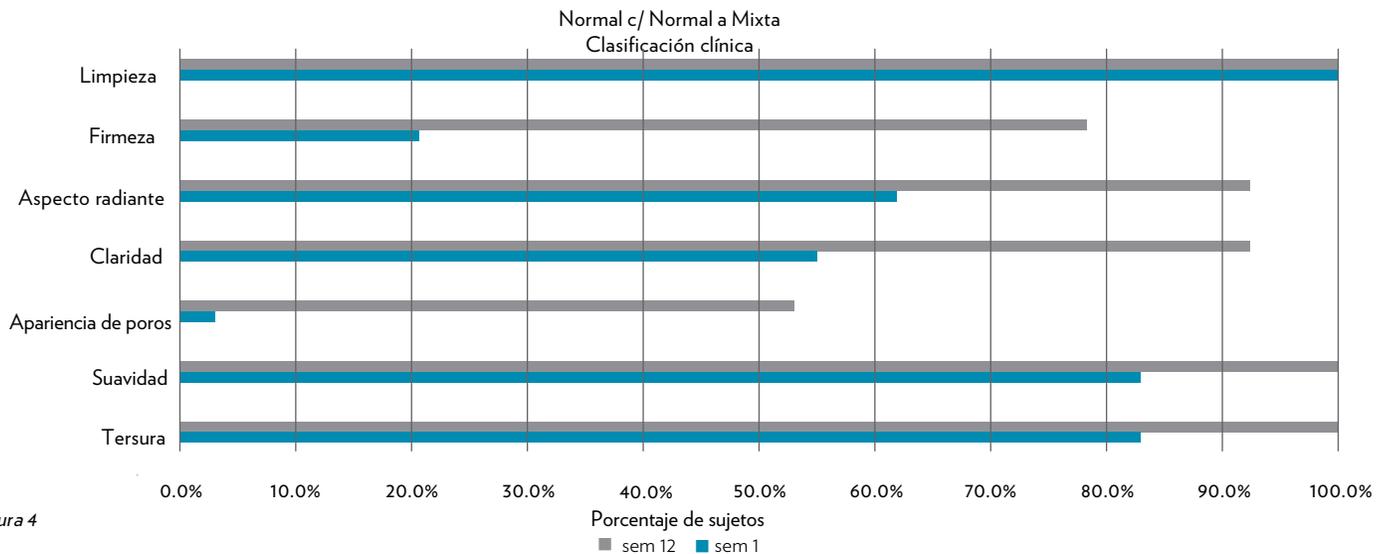


Figura 4

Normal c/ Seca
Clasificación clínica

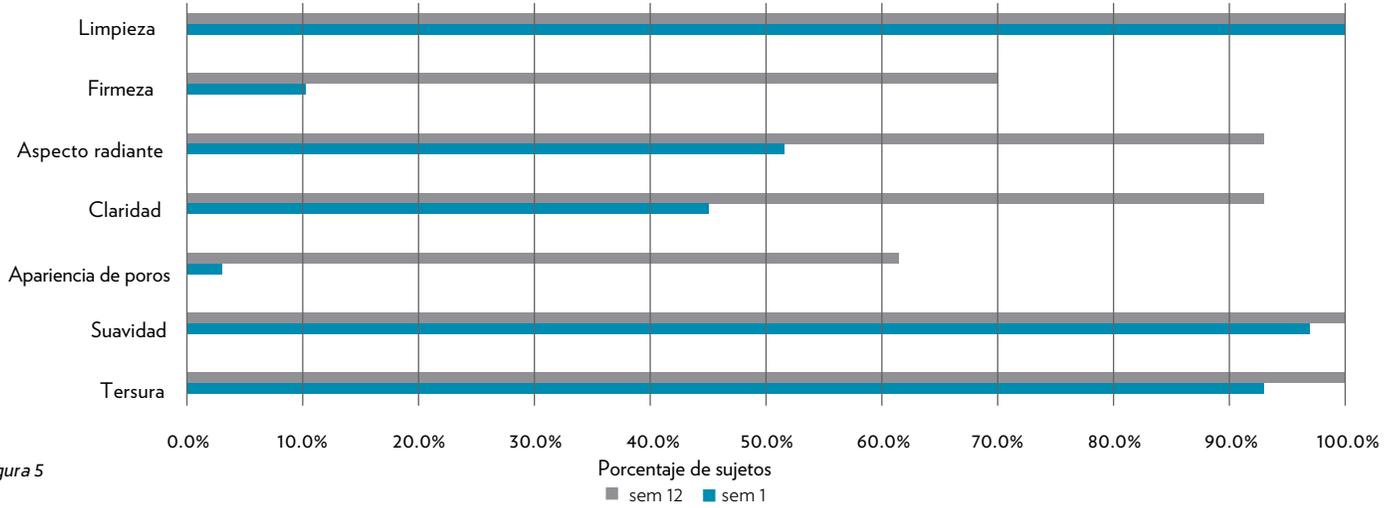


Figura 5

Firme c/ Grasa
Clasificación clínica

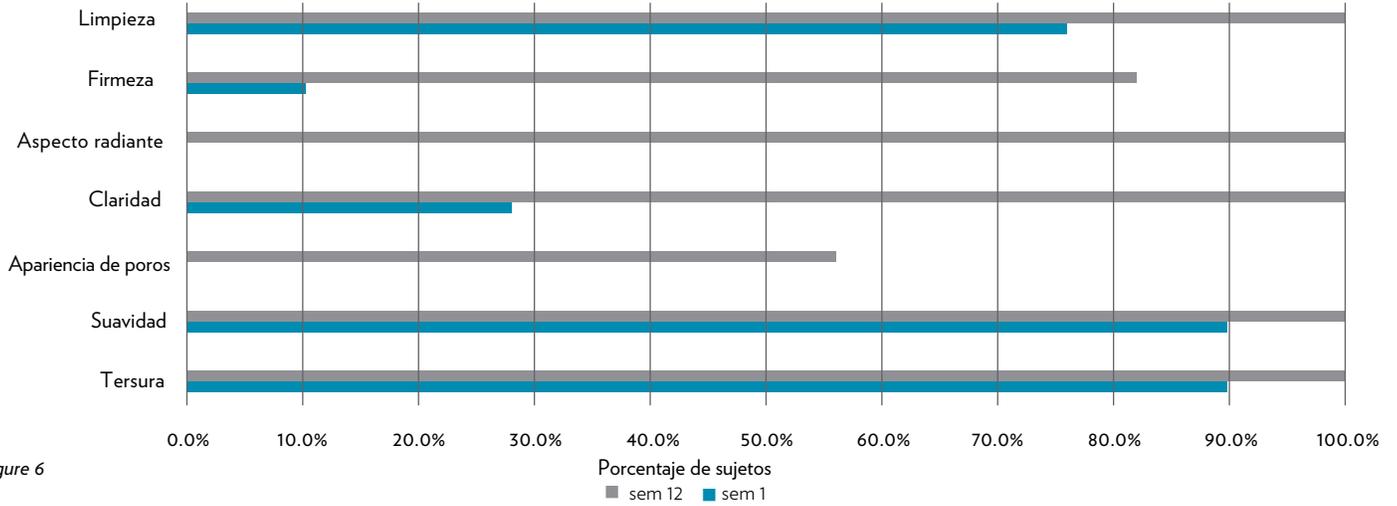


Figure 6

CONCLUSIÓN

El sistema ageLOC® LumiSpa® puede mejorar de manera eficaz el aspecto de la piel mientras la limpia. Las mejoras en la apariencia de la piel se notan de manera pronta y continúan con el uso. Las mejoras observadas varían dependiendo del tipo de piel. El sistema tiene beneficios para aquellos con tipos de piel seca, normal a mixta o grasa.

